

ANALIZADOR BIOQUIMICA SEMI-AUTOMATIZADO CON BAÑO MARIA

MARCA : BOKERT

MODELO : SK3002B1

BIOKERT

Medical Diagnostic Equipment

ANALIZADOR BIOQUIMICO SEMIAUTOMATIZADO C/BAÑO MARIA X 8 HOYOS

MOD. SK3002B1



Un analizador bioquímico es un equipo de laboratorio, el cual tiene entre sus funciones medir el nivel del suero sanguíneo como: glucosa, colesterol, triglicéridos, ácido úrico, proteínas, enzimas.

Características:

- Pantalla LCD a color de 7" Touch screen.
- Incubadora de tubos con 10 posiciones para muestras y 3 cronómetros.
- Modo Compatible para Celda de flujo y Cúbeta.
- Curva de Reacción en tiempo real.
- 7 longitudes de onda.

- 80 test pre-programados.
- Memoria para 10000 resultados.
- Función de hibernación de fuente de luz que prolonga la vida útil de la lámpara.
- Interface RS232, conexión a PC.

Especificaciones:

- Método de prueba: Cinética. Punto final. Dos puntos. Absorbancia.
- Precisión de longitud de Onda: Fuera 0.0001 Abs. Dentro 0.0001 Abs.
- Rango de absorbancia: 0~4.500 Abs.
- Longitudes de onda: 7 filtros estándar: 340 nm., 405 nm., 492 nm., 510 nm., 546 nm., 578 nm., 630 nm., 1 posición libre.
- Repetibilidad: CV% < 1%.
- Incubadora de Celda de Flujo: 37°C, 30°C, 25°C, y otras. Precisión ±0.1°C.
- Volumen de Muestra: 0 ~ 3000 ul. (Recomendado 500 ul.).
- Almacenamiento de Datos: 10 000 datos.
- Curva de Control de Calidad: Curva de control de calidad L - J para cada elemento de prueba. Media, DS y CV%.
- Celda de Flujo: Vidrio de cuarzo 32 ul., 10 mm.
- Lámpara: Lámpara Halógena de vida prolongada 6V/10W.
- Pantalla: LCD a color 7".
- CPU: Serie ARM micro CPU de alta velocidad.
- Impresora: Impresora térmica interna.
- Interface: RS - 232.
- Ambiente de Trabajo: Temperatura 0°C ~ 40°C. Humedad: < 80%.
- Fuente de Poder: 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz., 100VA.
- Dimensiones: Largo: 34.0 cm. x Profundidad: 27.0 cm. x Altura: 16.0 cm.
- Peso: 5 Kg



DROGUERÍA
JANMEDIC

JAN MEDICAL IMPORT E.I.R.L.

R.U.C. 20607805165

Importación y Comercialización de Material Médico,
Laboratorio, Dental, Venta de Equipos Médicos,
Reparaciones y Repuestos en General

BIOKERT

Medical Diagnostic Equipment

Accesorios:

- 1 lápiz táctil.
- 1 rollo de papel para impresora.
- 1 botella de residuos.
- 1 funda.
- 1 Tubo de bomba de repuesto.
- 1 lámpara.
- Cable interface
- CD software
- Manual y certificado de garantía
- Cable de Poder.



Soporte Técnico:

Se recomienda hacer el mantenimiento preventivo en el tiempo que el manual de uso especifica a fin de obtener el óptimo rendimiento y durabilidad del equipo. Este equipo cuenta con un mantenimiento preventivo gratuito en nuestras instalaciones de Lima dentro del tiempo de garantía. No incluye reparación y/o cambio de accesorios

Garantía:

12 meses contados a partir de la fecha de entrega de los equipos, por defecto de fábrica siempre y cuando los equipos hayan sido expuestos al uso común a lo cual fueron destinados.





DROGUERÍA
JANMEDIC


JAN MEDICAL IMPORT E.I.R.L.

R.U.C. 20607805165

Importación y Comercialización de Material Médico,
Laboratorio, Dental, Venta de Equipos Médicos,
Reparaciones y Repuestos en General

BIOKERT

Medical Diagnostic Equipment

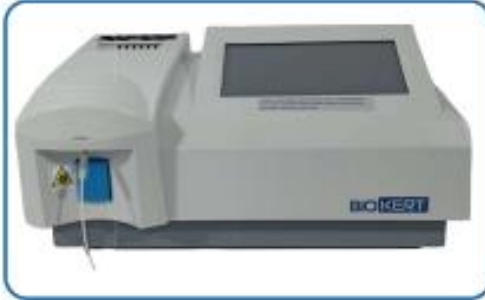

BIOKERT

Medical Diagnostic Equipment

IMAGEN REFERENCIAL